

# Forspiro®



## Ингаляция осуществляется в 3 этапа

# 1



### Открытие

- Взять ингалятор в левую руку.
- Правой рукой открыть защитный колпачок.

# 2



### Подготовка к работе


- Зарядить ингалятор, нажав правой рукой боковой откидной клапан белого рычага до щелчка.
- Затем переместить белый рычаг в исходное положение до щелчка.

# 3



### Ингаляция

- Медленно и расслабленно выдохнуть не в ингалятор.
- Плотно обхватить мундштук губами и равномерно глубоко вдохнуть (не через нос).
- Затем извлечь мундштук изо рта и задержать дыхание на 5–10 секунд
- Медленно выдохнуть, также не в ингалятор.
- Закрыть защитный колпачок.
- Прополоскать рот водой и сплюнуть.

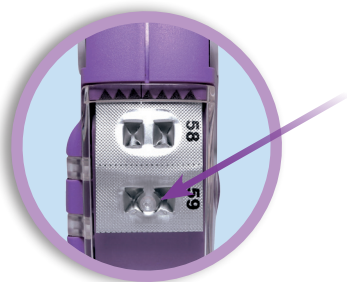

### Визуальный контроль через прозрачное боковое отделение\*

- Остатки порошка в боковом отделении свидетельствуют о неправильном выполнении ингаляций.
- Отрывая в конце дня блистерную ленту, можно проверить, было ли сделано предписанное количество ингаляций. Это позволяет осуществлять ежедневный контроль.

\* После использования 5 ингаляционных доз в боковом отсеке появляются пустые блистеры, позволяющие контролировать остатки порошка.

